

JE VEUX


Activer mon bracelet V.ALRT

Comme le bracelet V.ALRT est fourni avec le « Plan bénéfice », il est déjà associé à la tablette prémontée reçue pour le « proche aidé ».

Pour l'activer, connectez-vous avec la tablette au compte du proche aidé selon les instructions contenues à l'intérieur de la boîte.

Étape 1. Page d'accueil


La page d'accueil devrait ressembler à cela :

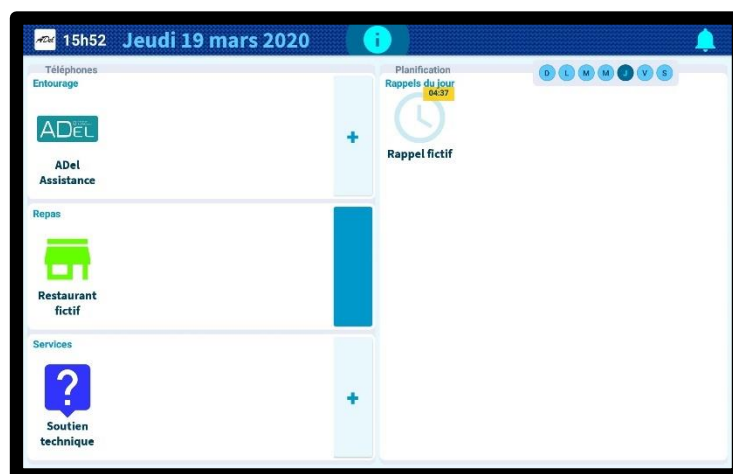

Si vous ne voyez pas l'icône du bracelet en haut, près de la clochette, c'est qu'il ne s'est pas connecté. Il se peut que la batterie ne soit pas dans le bouton du bracelet; vérifiez.

Étape 2. Aller ensuite à la page d'édition


Pour ouvrir la page d'édition, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le logo ADeL et d'entrer le code demandé (vous l'avez reçu dans la boîte d'expédition).

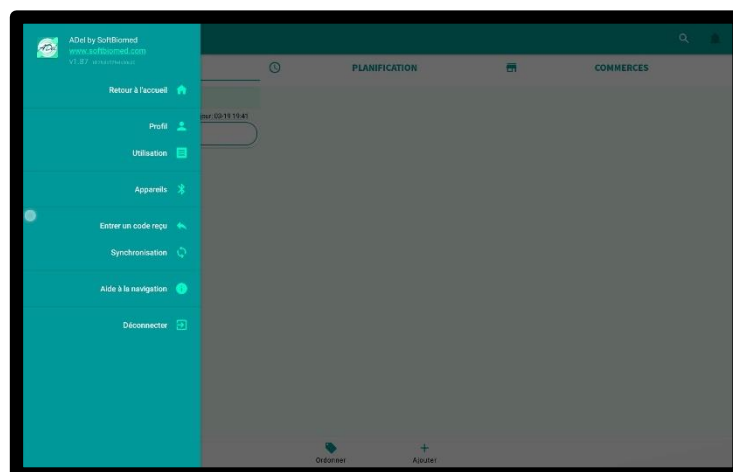

Choisir ensuite « **Appareils** »

JE VEUX

Si vous recevez ce message c'est que vous devez vous assigner un proche aidant qui recevra vos notifications et textos d'alerte. Pour ce faire, allez à [l'aide contexte](#) sur le site de Softbiomed à l'ite, 1a, Étape 2.

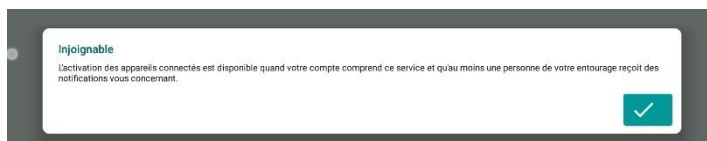

Pour vérifier que votre proche aidant est bien votre administrateur, à l'écran d'accueil, vous devez voir une valise à côté de son contact comme dans l'exemple ci-après, cela signifie qu'il a tous les outils pour vous supporter:



Étape 3. Sélectionner son bracelet


Retournez sur Appareils et si le bracelet est allumé, il va apparaître d'abord noir avec un rond bleu qui tourne au centre et il devrait passer totalement au bleu automatiquement après quelques secondes; ça signifiera qu'il s'est activé et qu'il est prêt.

Si vous ne le voyez pas appuyez sur rechercher :




JE VEUX

Vous devriez le voir apparaître à l'écran; appuyez dessus pour l'activer :

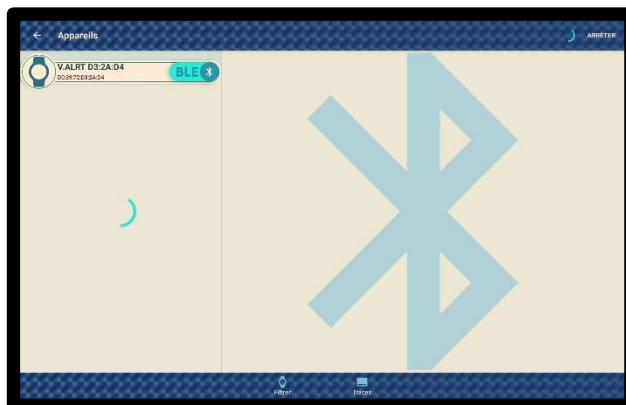


Étape 4. Activer la connexion de son bracelet

L'activation se fera et vous verrez ceci :

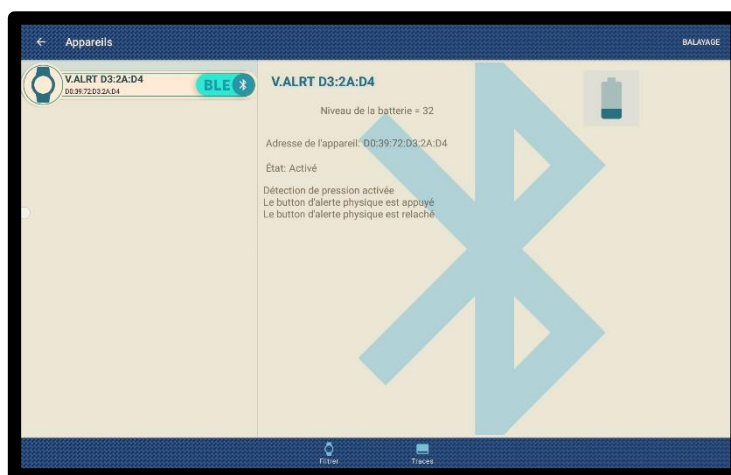

Appuyez ensuite sur le bouton pour déclencher une alerte, vous verrez ceci... assurez-vous de l'annuler avant la fin ou laissez aller pour vérifier que votre proche aidant a bien reçu le texto d'alerte.

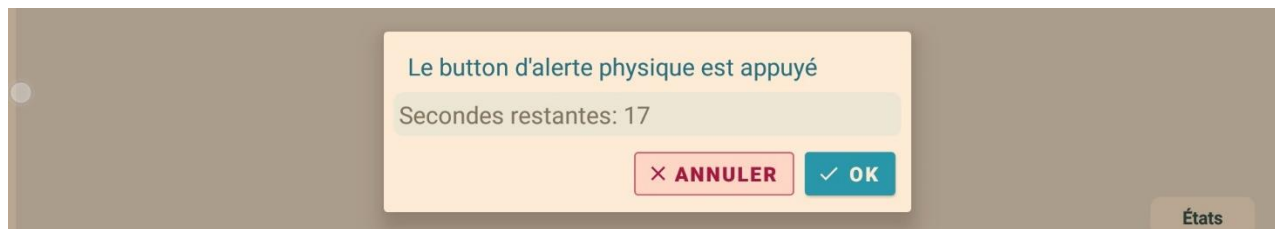

Étape 5. Difficultés


Batterie morte :

Il se peut que le bracelet soit éteint ou que sa batterie soit morte. Dans ce cas, à l'écran recherche, appuyez sur Balayage et enfoncez le bouton pendant environ 30 secondes, il devrait réapparaître à l'écran; appuyez dessus pour l'activer.

JE VEUX

Remplacement de la pile

Si vous devez remplacer la pile, voici les instructions :

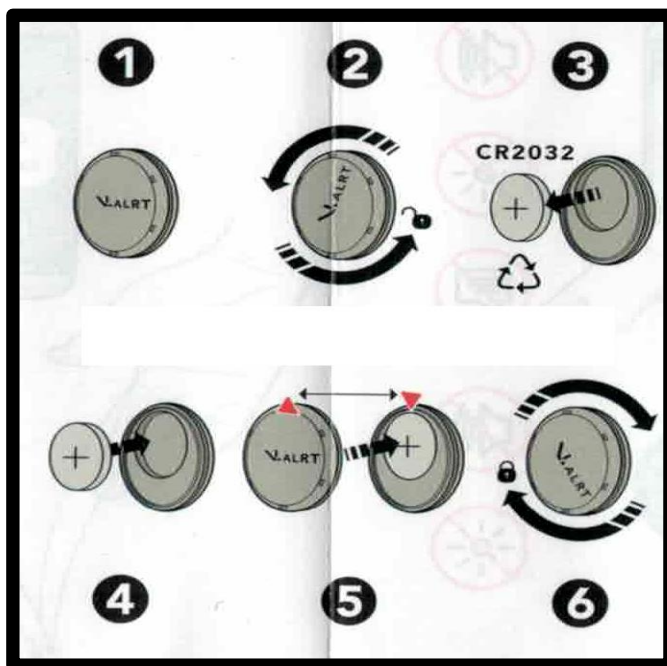

Pour réactiver votre bracelet, répétez la même procédure que pour « Batterie morte » tout en restant à la page d'accueil.

Cas de difficulté majeure

Dans le cas où vous n'arrivez à rien, il est suggéré de redémarrer la tablette et de reprendre au début.

Champion! Votre bracelet est activé.