

# ENGLISH

(FLIP THE PAGE FOR SPANISH)

STEP  
1

## Effort Belt

Verify that both snaps on the effort belt are firmly snapped to the SleepView® Monitor.



Wrap the belt around you using the Velcro tabs to secure it snugly but comfortably around your chest.




Pull the belt above your chest line so SleepView® is positioned at the center of your chest.

STEP  
2

## Nasal Cannula

Remove the nasal cannula from its plastic packaging.

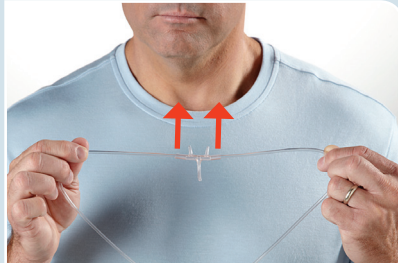

Hold the nasal cannula with both hands so the nasal prongs point up toward your nose.




Insert the nasal prongs into your nose. Pull the tubing behind both ears. Push the plastic slide up to tighten the cannula tubes at your chin.

STEP  
3

## Pulse OX

The Pulse OX sensor is already plugged into SleepView®. You may route the wire through the neck of your shirt and out the sleeve.

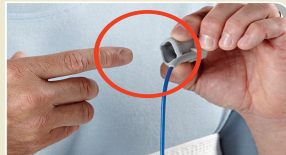

Slide your index finger from either hand into the sensor so the icon of a finger covers your fingernail.




Make a fist, then place a piece of medical tape across the back of your hand to secure the wire in place.

See back for final instructions.

## Final Instructions

1. SleepView® is pre-programmed to turn ON and OFF at your regular sleep time. If you choose to go to bed earlier, then press the ON button located on the front of SleepView®. The power light should light green.
2. The lights for each connected sensor should be green, indicating that a strong signal is being recorded. If a light is amber, the sensor needs to be adjusted. If a light is red, the sensor is not properly attached to SleepView®. Adjust the sensors until the light for each connected sensor is green. **If a thermistor was not provided, the thermistor light will remain red.**
3. The sensor lights will go off after 90 seconds, but the power light will remain on. If you need more time to adjust the sensors, press the ON button again to turn all of the sensor lights on for an additional 30 seconds.
4. Sleep in the position that is most normal and comfortable for you. When you wake up for the morning, gently remove the sensors. Note: the cannula must be twisted off in order to be removed.
5. After you have removed the cannula, test the device to ensure that you have properly recorded a test. To do this, press the OFF button until the power light goes off. Then, press the ON button until the lights begin to flash. If the flashing lights are green, the test was recorded properly. If they are RED, call your physician as you may need to retake the test the subsequent evening.
6. If the test was recorded properly, discard the cannula. Return the SleepView® Kit to your physician's office.

If you are not using a thermistor, the thermistor light will remain red, which is normal.

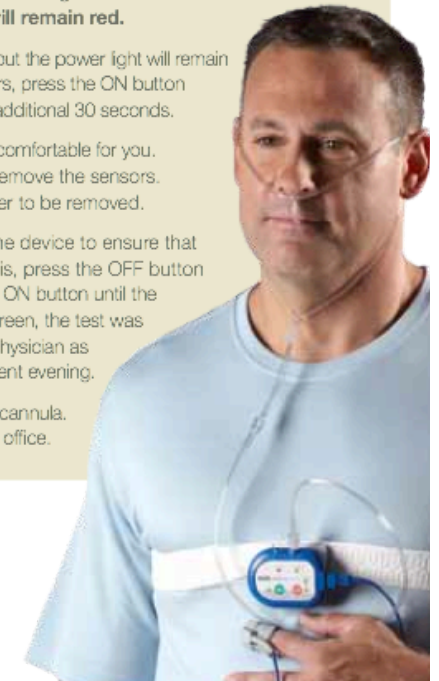

Questions? Call us toll free at 855.244.7533

# SPANISH

(FLIP THE PAGE FOR ENGLISH)

PASO  
1

## Cinturón de esfuerzo

Verifique que ambos broches del cinturón de esfuerzo se abrochen firmemente al monitor SleepView®.



Coloque el cinturón alrededor del pecho sujetándolo con las lengüetas de velcro de manera firme pero cómoda.



Coloque el cinturón por encima de la línea del pecho para que SleepView® quede ubicado en el centro del pecho.


SleepView®  
Monitor

En [ClevemedSleepview.com](http://ClevemedSleepview.com), encontrará un video instructivo titulado How to Use SleepView® (Cómo usar SleepView®).


PASO  
2

## Cánula nasal

Retire la cánula nasal de su envoltorio plástico.

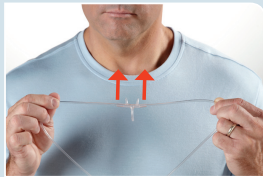

Sostenga la cánula nasal con ambas manos de manera tal que las puntas nasales apunten hacia la nariz.

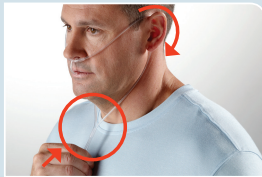

Introduzca las puntas nasales en la nariz. Coloque las mangueras detrás de las orejas. Empuje la corredera de plástico hacia arriba para ajustar las mangueras de la cánula a la altura del mentón.




Retire el protector de plástico del extremo de la cánula nasal y enrosque el extremo de la cánula en sentido horario en el conector de la cánula de SleepView® hasta que quede ajustado.

PASO  
3

## Oxímetro de pulso

El sensor del oxímetro de pulso ya se encuentra conectado a SleepView®. Puede pasar el cable a través del cuello de su camisa de manera tal que salga por la manga.

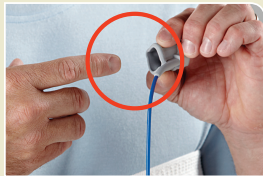

Coloque el dedo índice de cualquier mano dentro del sensor de manera tal que el símbolo del dedo quede encima de la uña.



Cierre el puño y, luego, sujete el cable a la parte posterior de la mano con un trozo de cinta adhesiva microporosa.

Consulte las instrucciones finales que se encuentran en el reverso.

## Instrucciones finales

1. SleepView® está preprogramado para encenderse y apagarse en su horario normal para dormir. Si decide irse a dormir más temprano, presione el botón ON (encendido) ubicado en la parte delantera de SleepView®. La luz de encendido debe prenderse de color verde.
2. Las luces de cada sensor conectado deben ser verdes, lo cual indica que se está registrando una señal fuerte. Si una luz se prende de color ámbar, se debe acomodar el sensor. Si una luz se prende de color rojo, el sensor no está correctamente conectado a SleepView®. Acomode los sensores hasta que la luz de cada sensor conectado cambie a verde. **Si no se suministró un termistor, la luz que corresponde al termistor permanecerá de color rojo.**
3. Las luces de los sensores se apagarán después de 90 segundos, pero la luz de encendido permanecerá encendida. Si necesita más tiempo para acomodar los sensores, presione el botón ON (encendido) nuevamente para encender todas las luces de los sensores durante otros 30 segundos.
4. Duerma en la posición que le resulte más normal y cómoda. Cuando se despierte a la mañana, retire suavemente los sensores. Nota: Se debe desenroscar la cánula para poder retirarla.
5. Después de haber retirado la cánula, pruebe el dispositivo para asegurarse de que registró correctamente una prueba. Para realizar este paso, presione el botón OFF (apagado) hasta que se apague la luz de encendido. Luego, presione el botón ON (encendido) hasta que las luces comiencen a parpadear. Si las luces parpadeantes son verdes, quiere decir que la prueba se registró correctamente. Si son ROJAS, llame a su médico, ya que es posible que deba hacer la prueba nuevamente la siguiente noche.
6. Si la prueba se registró correctamente, deseche la cánula. Devuelva el kit de SleepView™ a su proveedor de atención médica.



Si no está usando un termistor, la luz que corresponde al termistor permanecerá de color rojo, lo cual es



Tienes Preguntas? Llamanos 24/7 sin cargos al  
855.244.7433