

Sipariş Numarası	Ürün ya da Hizmet	Açıklama	Birim
M006D2201-0031	Rezüm™ Uygulama Cihazı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kablolu ve hortumlu Steril Uygulama Cihazı</li> <li>Steril Şırınga</li> <li>Steril Delme Ucu Adaptörü</li> <li>50 ml Steril Su Flakonu</li> </ul>	1
G2200-0031	Rezüm Jeneratör	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taşınır Jeneratör</li> <li>Güç Kablosu</li> </ul>	1

Rezüm Sistemi prosedürü için genellikle gerekli olan diğer materyallerden bazıları şunlardır:

- Oda sıcaklığında salin kaynağı (1L önerilir)
- 4 mm, 30 derece, 30 cm Storz ya da Richard-Wolf sert sistoskop lensi
- Işık kaynağı ve kablo
- 240V priz

Materyallerin tam listesi için Rezüm Sistemi Kullanım Kılavuzuna bakınız.

\* Bireysel klinik duruma ve iyileşme yanıtına bağlıdır.

- Roehrborn CG, Gange SN, Gittelman MC, et al. Convective water vapor energy (WAVE) ablation therapy: durable two-year results and prospective blinded crossover study for treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. J Urol 2017; 197: 1507.
- McVary KT, Gange SN, Gittelman MC, et al. Minimally invasive prostate convective water vapor energy (WAVE) ablation: A multicenter, randomized, controlled study for treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. J Urol 2016; 195: 1529.
- McVary KT, Rogers T, Roehrborn CG. REZÜM™ water vapor thermal therapy for lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia: 4-year results from randomized controlled study.

**DİKKAT:** İlgili yasalar gereği, bu cihazların satışı yalnızca hekim tarafından veya hekim siparişi üzerine yapılabilir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanma talimatları her cihazla birlikte sunulan ürün bilgilerinde yer alır. Yalnızca geçerli sağlık otoritesinin ruhsat verdiği ülkelerde kullanıma yönelik bilgilendirilmiştir. Bu materyal Fransa'da kullanıma yönelik değildir.

Ürünler yalnızca BİLGİLENDİRME amacıyla gösterilmiştir ve bazı ülkelerde onaylı veya satışa sunulmuş olmayabilir. Ürünün bulunabilirliğini yerel satış temsilcisiyle veya müşteri hizmetleriyle kontrol edebilirsiniz.

Tüm görseller Boston Scientific'e aittir. Tüm ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir.

Farklı klinik çalışmalarda elde edilen bulgular doğrudan karşılaştırılmaz. Bilgiler yalnızca eğitim amaçlı olarak sunulmuştur.

URO-581228-AA Medicalvision tarafından Almanya'da basılmıştır.

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2019 Boston Scientific Corporation  
veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.  
DINURO2389EA

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

**Rezüm™**  
Su Buharı Tedavisi




# Rezüm™ Su Buharı Tedavisi

Konvektif su buharı enerjisiyle çalışan Rezüm™ Sistemi, su buharında depolanan termal enerjiyi kullanır ve iyi huylu prostat hiperplazisine (BPH) sekonder olan alt idrar yolu semptomlarına (LUTS) neden olan tıkaçıcı dokunun bulunduğu prostat bezi bölgesine hedef odaklı ve kontrollü dozlarla enerji uygular.

9 saniyelik tedavilerin her birinde 0,42 ml'lik ısıtılmış steril su buharı kullanılır ve buhar doku boşluğuna hızlı ve düzgün bir şekilde dağılır. Su buharının yoğunlaşması, depolanan termal enerjinin salınmasına yol açar. Hücre zarları denatüre edilerek hücreler öldürülür, damar düzeni kapatılır, tedavi bölgesindeki alfa adrenerejik sinirlerin denervasyonu sağlanır ve böylece tekdüze ve tahmin edilebilir bir tedavi elde edilmiş olur.

Kesip çıkarılmış bu doku zamanla vücudunuzun doğal iyileşme yanıtı tarafından yeniden emilir, bu da doku hacmini azaltarak üretranın açılmasını ve alt idrar yolu semptomlarının giderilmesini sağlar.

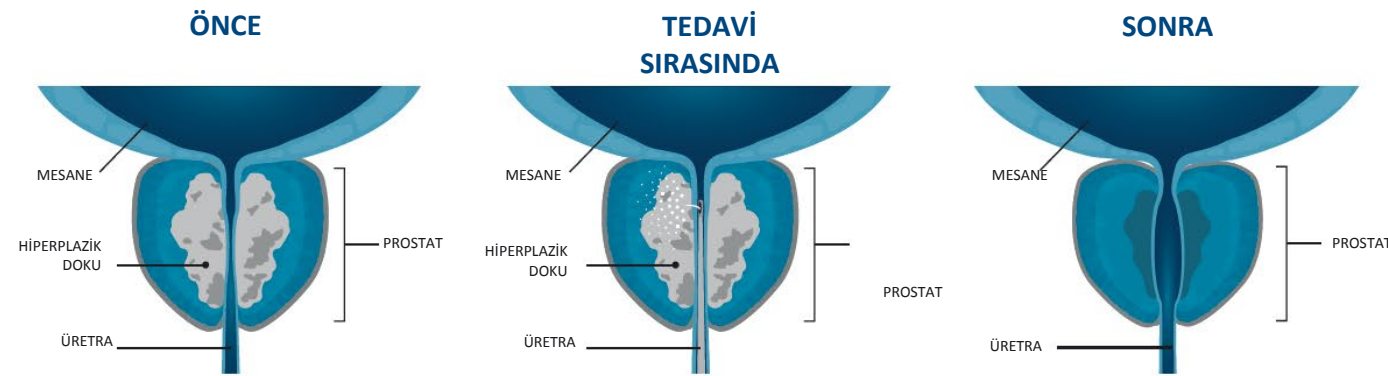

## Rezüm Tedavisi prosedürü, BPH hastası erkekler için şu faydaları sağlar:

- BPH ilaçlarına bir alternatiftir<sup>1</sup>
- Bilimsel çalışmalarca ortaya konduğu üzere Rezüm semptomları güvenli ve etkili biçimde giderir<sup>2</sup>
- Çoğu hastada iki hafta içinde semptomlar giderilmeye başlanır<sup>2</sup>
- Genel anestezi gerekmez<sup>2</sup>
- Eretil ve üriner fonksiyonlar korunur<sup>2</sup>
- Bir iki gün içinde normal aktivitelere geri dönmek mümkündür<sup>2\*</sup>

## Rezüm Tedavisine uygun hastalar şunlardır:

- BPH ilacı kullanmak istemeyen, kullanmaya devam etmesine rağmen memnun olmayan veya kullanmayı bırakmış erkekler
- Cerrahi BPH prosedürlerine açık olmayan erkekler
- Genel anestezi alamayan erkekler

## Endikasyonlar

Rezüm Sistemi, BPH ile ilişkili semptomları, tıkanıklıkları gidermek ve prostat dokusunu azaltmak açısından, aşağıdakilere sahip erkekler için endikedir:

- Prostat  $\geq 30$  cm<sup>3</sup>
- Merkezi bölge ve/veya medyan lob hiperplazisi olan prostat

## Kontrendikasyonlar

Rezüm Sisteminin kullanımı aşağıdakilere sahip hastalar için kontrendikedir:

- Üretral sfinkter implantı
- Penil protez

## Temel Etkinlik Sonuçları

IPSS sonuçları, tüm çalışmalar genelinde tutarlı ve uzun ömürlüdür. Rezüm Tedavisi, 4 yıllık bir süre boyunca 10,1 (%46,7) IPSS artışı ve +4,2 ml/sn akım hızı artışı göstererek uzun ömürlü sonuçlar vermiştir.<sup>3</sup>